

大動物や小動物の採血や投薬に使用いただけるカテーテルのご紹介です

カテーテルの先端形状は3種類、内部コーティングは1種類ございます

ベベルカット (60° カット)

標準仕様



フラットカット

追加費用無しでベベルカットからの変更可能




テーパー加工

フラットカットの先端を加工したものの。
1,200円 / 1本で加工できます



MPC コーティング

チューブ内部にコーティングします
図は内部にコーティングしたイメージです

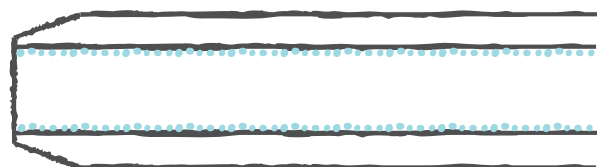

MPC コーティングとは

親水性の MPC*1 と疎水性の BMA*2 の共重合ポリマーによる表面コーティングです。

この処理により、機材表面に対するタンパクの吸着を抑える効果が得られます。

- *1 MPC 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine
2-メタクリロイルオキシエチル ホスホリルコリン
- *2 BMA n-butyl-methacrylate
n-ブチルメタクリレート

注意事項

MPC コーティングはアルコールではがれて
しまいますので、処理部分にアルコール類を
流したり浸したりしないようご注意ください。

チューブサイズや容量について

標準で $\phi 0.63 \times 1.02$, $\phi 0.36 \times 0.84$, $\phi 0.30 \times 0.64$ のチューブでご提供いたします。

チューブ内容量は 15 μ L、20 μ L、30 μ L、40 μ L、80 μ L やその他容量で作成可能です。

これら以外のチューブをご希望の場合もぜひお問い合わせください。

新型 HTEC はこちら



お問い合わせ



株式会社 **エイコム**

本社 (京都) : TEL 075-622-2112 (代表)

東京営業所 : TEL 03-3818-5223 (代表)

web : <http://www.eicom.co.jp> ➡

